

KXQ 缓冲吸入腔使用说明书

KXQ 缓冲吸入腔是专业用于雾化器、气雾剂（MDI）吸入时防止不适、器官痉挛、容易吸入、提高疗效的医疗器械。

预期用途：供医疗卫生单位在给患者进入雾化物、气雾剂吸入治疗用。

本产品主要是使雾化产生的雾化物通过单向阀机构可以自由吸入，有效防止雾化器、气雾剂（MDI）吸入时产生的器官痉挛等不适症状和节省药物、提高疗效；雾化颗粒在缓冲吸入时，大颗粒受重力影响自动沉淀，小颗粒容易吸入，颗粒变细可大大提高吸入量，提高疗效。通过缓冲采用单向阀，只是在吸气时吸入，大大提高舒适度；产品并具有易拆、易装、易消毒等特点且外观美观、精致、操作方便、安全可靠。

一、 主要性能

- 1、适用于超声波、气体压缩式雾化器、MDI 气雾剂
- 2、吸入腔一次缓冲储雾量 > 150 立方毫米
- 3、设有雾化吸入指示功能
- 4、所有零件易拆、易装、易消毒

二、 使用方法

治疗操作前的准备

缓冲吸入腔的拆卸清洗、消毒

将缓冲吸入腔从包装盒中取出，务必采取下列方法进行清洗、消毒：

分离腔体：

- 1) 握住腔体，将腔体盖稍用力向上拉动，即可卸下腔体盖。
- 2) 取下硅胶单向阀片
- 3) 从尾端拉下连接器
- 4) 从上盖上取下指示器罩
- 5) 从上盖里拉出硅胶指示器
- 6) 从上盖上卸下面罩
- 7) 从面罩里拉下硅胶单向阀

个人使用采用中性清洁剂（或 84 消毒液）进行清洗，最后应用清洁水冲洗擦干、保存或待用。

非个人使用，按医疗卫生单位液浸泡消毒规范每次使用必须用消毒液浸泡消毒。

建议一个病员一个疗程独立使用一套缓冲吸入腔。

清洗后的缓冲吸入腔按拆的顺序原样装好。

咽喉治疗方法及注意事项：

将口含嘴尽量进入口腔，微闭嘴唇但不要保住口含嘴，不要将雾化液喷到舌头上，不要吞咽雾化液，让雾化液尽量停留在患处。

吸入疗法的方法及注意事项：

在呼吸道进行吸入疗法时，应坐着，身体保持正直并放松，否则会堵塞呼吸通道，并不益于吸入疗法效果，如果必须要坐在床上进行治疗则必须用枕头支撑好，以便能尽可能坐得正直，即使在野外或特殊环境中使用，也应尽量保持呼吸畅通，合适的治疗时间，应遵照医

生嘱咐。（建议：一次治疗的时间相比略长不用吸入腔的时间）

在进行治疗时，要始终保持安静并放松，呼吸动作要慢，要深沉，将药物意念吸入到需要治疗的位置，以便药物能很好地深入到病症部位，作短时间的屏住呼吸，然后慢慢地将气呼出，呼气时不应太快，呼吸完成一次，稍微停顿一下。

在雾化治疗完毕后，应有充分的时间吸入新鲜空气，以便产生疗效。

如果是婴儿使用，一定要根据医嘱规定的时间使用。

每次使用后，剩余药物作为残液倒掉，清洗、擦干保存，下次待用。

三、注意事项：

1、吸入时注意流量指示器（在上盖与腔体连接处的凸台里），吸入时流量指示器应向面罩方向倾斜，倾斜的角度越大说明一次吸入的量越大，如果摆动很小说明吸入的力度不够，应增加吸入的力度。

2、吸入时发现异常检查缓冲吸入腔安装是否正确，零部件有否损坏。

3、 请勿让儿童将其作为玩具，不要让儿童单独使用本产品。

4、 如不确定如何使用本产品，请咨询医生


5、 如部件损坏或缺失请更换产品

本产品按使用方法正确使用，一般无故障发生。

* 如因使用发生困难或产生其他不明现象，请垂询客户售后服务热线

0086-513-82534891 chinanebulizer@yahoo.com.cn

附录：主要零部名称

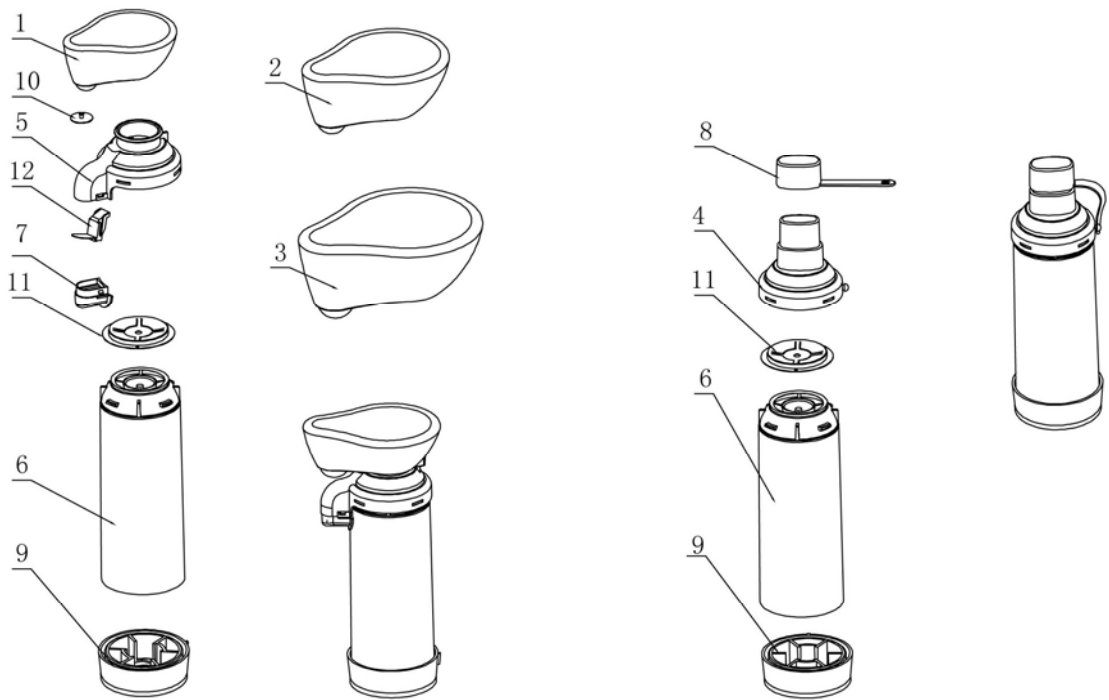

- | | | |
|------------|-------------|------------|
| 1、0-18个月面罩 | 2、18-60个月面罩 | 3、60个月以后面罩 |
| 4、60个月以上含嘴 | 5、吸入腔罩 | 6、吸入腔体 |
| 7、指示器罩 | 8、防尘罩 | 9、连接适配器 |
| 10、面罩单向阀 | 11、吸入腔体单向阀 | 12、吸入指示器 |

其他信息：

生产许可证：

产品注册号：

产品标准号：

制 造 商：南通杰西电器有限公司

制造商地址：江苏省南通市通州区川姜镇川西村

制造商电话：0513-82534891